



Dr.Bean *Slim & Beauty*

訂購熱線：(852)5168-3337

email : info.dr.bean@gmail.com

抗皺美容儀

貨品編號： P15-F34-312

產品分類： 家用美容儀器

能治療全臉皺紋抗皺消除
細紋美肌一take過



抗皺美容儀

美容儀器介紹

LightStim美容儀是以掌上型設計，適用於全臉皺紋、細紋及毛孔粗大的人士作治療。它有4種類型的LED：605nm琥珀色光，630nm的紅色光，660nm的紅色光，以及855nm紅外光。如果您有臉部皺紋及想收細毛孔，那麼，這將是一部為您而生的美容儀。

產品功效:

1. 減少並消除細紋和皺紋
2. 刺激膠原蛋白和增加皮膚彈性
3. 緊致老化或疲勞的肌膚，收細毛孔
4. 平滑肌膚的質感，增加皮膚彈性，使您的肌膚恢復青春容顏

1. 紅外光 (855nm)

加速愈合，減少炎症，促進血液循環，令皮膚將產品吸收得更好



Dr.Bean *Slim & Beauty*

訂購熱線：(852)5168-3337

email : info.dr.bean@gmail.com

2. 琥珀光 (605nm)

製造膠原蛋白和彈性蛋白

3. 紅光 (630nm & 660nm)

減少炎症，促進血液循環

隨着我們年齡的增長，皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白的數量逐步減少(每年減少約1%)，使細紋和皺紋慢慢形成。

LightStim光學抗皺美容儀通過穿透皮膚的表皮層，以刺激皮膚產生膠原蛋白和彈性蛋白的自然能力。

這種方法增加的膠原蛋白各彈性蛋白數量可以豐潤皮膚的真皮層，逐步去除細紋和皺紋。

LEDs是有治療作用的

LED代表發光二極管，這是一個被包裹在玻璃內的微小電腦芯片。每個LED光的波長(顏色)提供了獨特的治療效果。LED是非侵入性的、無痛的且無需恢復時間的。這種光適合於所有類型的皮膚，並且發出舒緩溫暖的光綫。

多光波技術

LightStim將NASA (美國太空總署)

的LED技術提升到了一個新的水平，發展多光波技術來同時發射多個波長(顏色)

的光。這些不同波長的光同時工作，以給皮膚提供營養，使皮膚更年輕及容光煥發。

FDA臨床試驗表明：

8周後，100%的臨床試驗的參與者都有顯著的改善。

FDA(Food and Drug Administration)即美國食品和藥物管理局，它能確保美國本國生產或進口的食品、化妝品、藥物、生物製劑、醫療設備和放射產品的安全。

本店所售的LightStim光學抗皺美容儀是世界上第一部通過FDA批准的用於治療“全臉”皺紋的儀器。

Tips:為了獲得最佳效果，最初6-8星期建議每週使用5天，8個星期後，每星期用大約2天才可。

LightStim App


大家可以在App Store或iTunes或Google play免費下載LightStim App。它能夠計算治療時間，得到小tips，產品使用指南，客戶支持等等。是你使用LightStim時的好幫手！

LightStim Video 介紹

<http://youtu.be/72dmLrQtFpA>

<http://youtu.be/XgcRLqciGAW>

<http://youtu.be/v7YVh56SJZI>

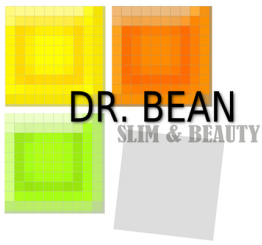

Dr.Bean *Slim & Beauty*

訂購熱線：(852)5168-3337

email : info.dr.bean@gmail.com

使用LightStim抗皺LED美容儀產品之溫馨小tips:

1. 先飲半杯至1杯既水。
 2. 清洗好面部所需位置。
 3. 搽上所需膠原蛋白肽精華液或其他有效的精華液。
 4. 輕輕放美容儀在所需的同一位置。
 5. 打開美容儀的開關制。
 6. 在同一位置用3分鐘。
 7. 在另一所需位置，再重複3-6既步驟。
 8. 完成以上步驟，記得用消毒濕紙巾/濕紙巾清潔您的美容儀，可保養得更好。
- *一開始的八個星期，每星期用4-5次 (用2日停1日的形式);
八個星期後每星期用2-3次就可以(用1日停2日的形式); 去皺去印收毛孔:)